



13

IDROTERAPIA

- 328 Vasche idromassaggio - Serie Ocean
- 330 Vasche idromassaggio - a farfalla
- 331 Vasche idromassaggio - con trattamento elettrogalvanico
- 332 Vasche 2 celle Lastura e 4 celle Electra
- 333 Vasca da parto in acqua
- 334 Accessori

Vasche idromassaggio serie Ocean

La vasca per massaggio subacqueo a vortice Ocean è usata per il trattamento a massaggio di tutto il corpo e di zone mirate, tramite l'applicazione di un getto d'acqua sia attraverso ugelli che attraverso una lancia. Questo tipo di massaggio produce effetti meccanici e termici. Una temperatura adeguata del bagno e del getto d'acqua provoca il rilassamento dei muscoli.

La pressione della corrente d'acqua favorisce il riscaldamento dei muscoli, con effetti a livello sia neurale che metabolico. Questo tipo di massaggio è usato per il trattamento di stati post-traumatici, di lesioni alla muscolatura e ai legamenti, circolazione sanguigna insufficiente alle estremità del corpo, ischialgia, poliomielite spastica atonica e obesità.



Modello rappresentato cod.CH3200

CH3000 OCEAN ECONOMY

Vasca con lancia da massaggio con getto e supporto. Regolazione continua della pressione (da 0 a 450 kPa) e del mix aria nel getto della lancia. Lettura e visualizzazione analogica della temperatura dell'acqua di riempimento e della pressione. Funzione telefono doccia incorporata nella lancia da massaggio. Sistema di drenaggio completo per lo scarico totale dell'acqua dal circuito massaggiante. Risciacquo degli ugelli. Piedini regolabili in altezza. Scaletta a due gradini.

CH3100 VASCA OCEAN STANDARD

A 24 getti massaggianti. Regolazione performance dei getti d'acqua. Mix e regolazione dell'aria per i getti della zona massaggiante. Lettura e visualizzazione elettronica della temperatura dell'acqua di riempimento. Protezione elettronica della pompa in caso di funzionamento a secco. Facile controllo tramite pulsantiera con display a LED a 8 cifre. Impostazione durata trattamento da 0 a 99 minuti. Lettura e visualizzazione elettronica della pressione dell'acqua nel sistema di idromassaggio. Lancia da massaggio con porta lancia. Regolazione continua della pressione nella lancia da 0 a 450 kPa. Regolazione continua della pressione del mix aria nella lancia. Telefono doccia sanitario con valvola di stop per la pulizia della vasca. Sistema di drenaggio completo per lo scarico totale dell'acqua dal circuito massaggiante. Risciacquo degli ugelli. Piedini regolabili in altezza. Scaletta a due gradini.

CH3200 OCEAN FORTE

Caratteristiche come modello cod. CH3100 ma con 40 getti massaggianti.

CH3500 VASCA OCEAN DE LUXE PC

Vasca per idroterapia a controllo computerizzato, impostabile tramite touchscreen LCD. Il funzionamento automatizzato consente il riempimento dell'acqua al livello e alla temperatura impostati, l'inizio ed esecuzione automatici della procedura selezionata, dopo che il paziente è in posizione seduta all'interno e, al termine della procedura, il drenaggio automatico dell'acqua e il risciacquo della pompa e di tutte le zone massaggianti. Dotazione standard: 174 getti d'acqua divisi in 5 zone di massaggio indipendenti. 28 programmi di massaggio pre-impostati e illimitati ulteriori programmi configurabili. Regolazione dei getti d'acqua a mix d'aria. Regolazione automatica della temperatura dell'acqua durante il trattamento. Griglia idromassaggio a 38 getti d'aria. Anti incrostazioni elettromagnetico. Piedini regolabili in altezza. Telefono doccia per pulizia. Scaletta a 2 gradini.

ACCESSORI

- CH0002 SCALETTA CON CORRIMANO
- CH0005 GRIGLIA IDROMASSAGGIO
- CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI
- CH0008 CROMOTERAPIA 32 OCEAN
- CH0014 CONNETTORE GRIGLIA IDROMASSAGGIO
- CH0021 MAGNETOTERAPIA
- CH0020 SISTEMA RICICLO ACQUA OCEAN

ACCESSORI

- CH0002 SCALETTA CON CORRIMANO
- CH0005 GRIGLIA IDROMASSAGGIO
- CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI
- CH0009 CROMOTERAPIA 32 OCEAN
- CH0013 SISTEMA RICICLO ACQUA OCEAN
- CH0014 CONNETTORE GRIGLIA IDROMASSAGGIO
- CH0021 MAGNETOTERAPIA

ACCESSORI



- CH0002 SCALETTA CON CORRIMANO
- CH0005 GRIGLIA IDROMASSAGGIO
- CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI
- CH0014 CONNETTORE GRIGLIA IDROMASSAGGIO
- CH0016 LANCIA PER MASSAGGIO SUBACQUEO - OCEAN DE LUXE PC
- CH0017 CROMOTERAPIA 48 OCEAN
- CH0018 SISTEMA RICICLO ACQUA OCEAN
- CH0021 MAGNETOTERAPIA

Vasche idromassaggio serie Ocean

13



Vasca "OCEAN DE LUXE pc" per idroterapia a controllo computerizzato

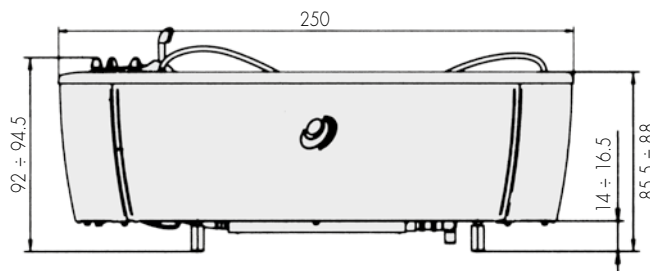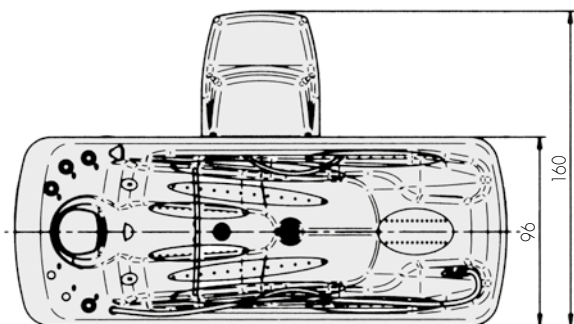

CARATTERISTICHE TECNICHE



	CH 3000	CH 3100	CH 3200	CH 3500
Dimensioni senza scaletta	250 x 96 x 92 / 94,5 h cm	250 x 96 x 92 / 94,5 h cm	250 x 96 x 92 / 94,5 h cm	250 x 96 x 92 / 94,5 h cm
Capacità utile vasca	280 l	280 l	280 l	260 l
Capacità max vasca	450 l	450 l	450 l	440 l
Tempo di riempimento - capacità utile vasca	3,5 min	3,5 min	3,5 min	3,2 min
Tempo di svuotamento - capacità utile vasca	3,1 min	3,1 min	3,1 min	2,7 min
Peso	114 kg	137 kg	139 kg	180 kg
Temperatura max acqua	60°C	60°C	60°C	60°C
Pressione lancia di massaggio	0-0,57 MPa	0-0,36 MPa	0-0,48 MPa	0-0,48 MPa
Max flusso d'acqua della pompa	135 l/min	433 l/min	433 l/min	433 l/min
Alimentazione	3 x 400 V - 50 Hz	3 x 400 V - 50 Hz	3 x 400 V - 50 Hz	3 x 450 V - 50 Hz
Potenza d'ingresso	1150 VA	2200 VA	2500 VA	2500 VA
Immissione acqua calda e fredda	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"

IDROTERAPIA

Vasche idromassaggio a farfalla

CH1100 VASCA A FARFALLA

La vasca a farfalla è indicata per il massaggio terapeutico di tutto il corpo o di sue zone. Il massaggio subacqueo può essere applicato sia a pressione tramite la lancia sia a vortice tramite corrente d'acqua direzionata dalle bocchette per l'idroterapia. Dotazione standard: una zona massaggiante con 12 bocchette; è possibile regolare l'intensità dei getti d'acqua e la percentuale d'aria mescolata. Lettura e visualizzazione analogica della temperatura dell'acqua di riempimento. Lancia di massaggio idroterapico con getto massaggiante. Supporto lancia. Regolazione continua del mix aria/acqua nella lancia di massaggio. Lettura e visualizzazione analogica dell'efficienza del massaggio. Telefono doccia per lavaggio igienico. Scaletta a due gradini.

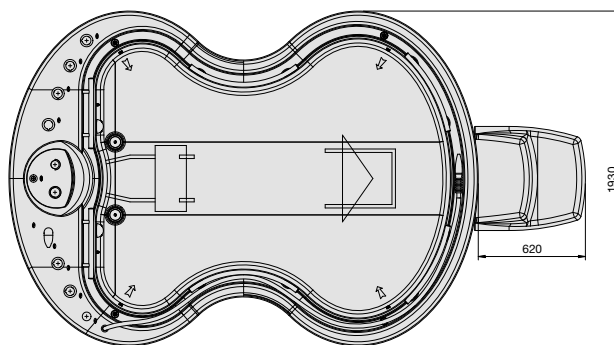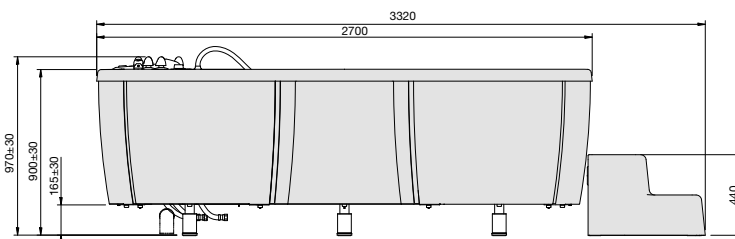

CARATTERISTICHE TECNICHE

CH 1100

Dimensioni senza scaletta	270 x 193 x 98 h cm
Capacità utile vasca	700 l
Capacità max vasca	1235 l
Tempo di riempimento - capacità utile vasca	9 min
Tempo di svuotamento - capacità utile vasca	4 min
Peso	220 kg
Temperatura max acqua	60°C
Pressione lancia di massaggio	0-0,48 MPa
Max flusso d'acqua della pompa	233 l/min
Alimentazione	3 x 400 V - 50 Hz
Potenza d'ingresso	1500 VA
Immissione acqua calda e fredda	2 x 1"


ACCESSORI

- CH0022 SUPPORTO SCHIENA E GAMBE
- CH0023 CROMOTERAPIA
- CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI
- CH0002 SCALETTA CON CORRIMANO



Vasche idromassaggio con trattamento elettrogalvanico

CH8000 ELECTRA CG TUB

Vasca per il trattamento elettrogalvanico di tutto il corpo. Gli elettrodi sono posizionati a lato, sotto i piedi e dietro la testa della persona. Correnti impostabili: galvanica, monofase, difase, lungo periodo, corto periodo. È possibile programmare e memorizzare la sequenza degli elettrodi e delle correnti da attivare in base alle necessità terapeutiche. Facile controllo tramite display con touch screen. Telefono doccia per igiene. Piedini regolabili in altezza. La vasca è fornita di scaletta a 2 gradini.

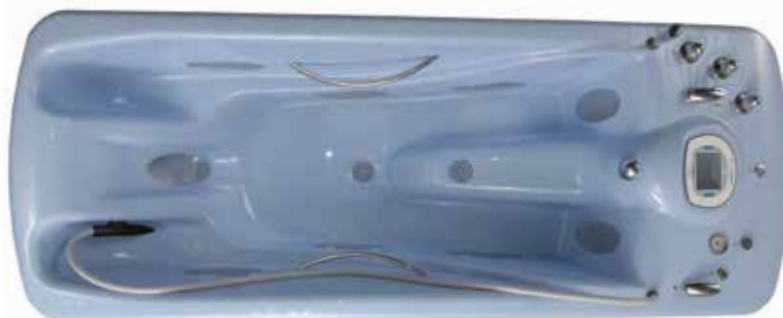

Nella foto è compreso l'accessorio CH0015

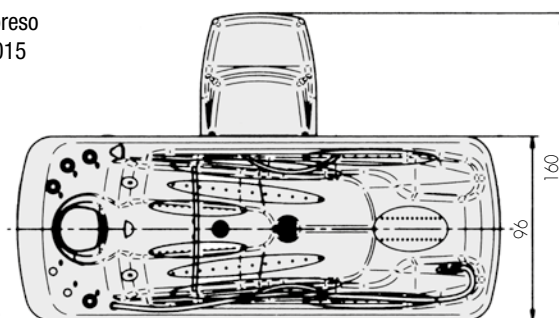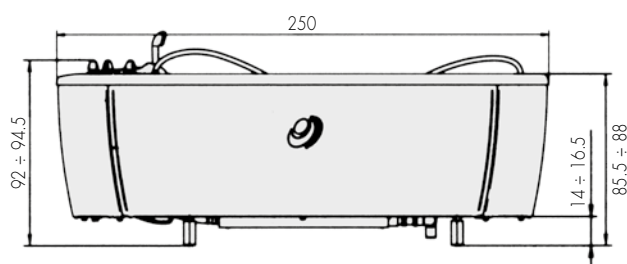

Indicazioni terapeutiche

La galvanoterapia è particolarmente consigliata per: disturbi del sistema nervoso centrale, nevralgia, polineurite, poliomielite non paralitica e nelle situazioni di aumento o diminuzione della sensibilità dei nervi afferenti ed efferenti. Disturbi infiammatori degenerative e cronici del Sistema motorio, principalmente a livello delle giunture delle gambe e mani, per il reumatismo muscolare e altri tipi di reumatismo nelle giunture più piccole, per le condizioni traumageniche e per la vasoneurosi, la spasticità muscolare diffusa, le contrazioni miocloniche, durante la fase terminale della atrofia di Sudeck, e in presenza della perdita di tono muscolare degli arti inferiori e superiori.”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	250 x 96 x 92 / 94,5 h cm
Capacità utile vasca	320 l
Capacità max. vasca	450 l
Tempo di riempimento - capacità utile vasca	3,7 min
Tempo di svuotamento - capacità utile vasca	2,7 min
Peso	126 kg
Temperatura max acqua	60°C
Alimentazione ⁽²⁾	230 V - 50 Hz
Potenza d'ingresso	50 VA
Precisione corrente	+/- 10%
Precisione tempo	+/- 5" h
Regolazione corrente	2 mA step
Variatione corrente	100 mA/s
Valore corrente	0-1200 mA
Numero elettrodi	9
Possibilità di scegliere la polarità della fonte	Per ogni elettrodo
Indicatore polarità	Per ogni elettrodo
Voltaggio in uscita	24 V
Raddrizzamento parziale	50 Hz monofase (MF)
Raddrizzamento integrale	100 Hz difase (DF)
1 sec MF + 1 sec DF	CP
Protezione elettrica	Classe I
Protezione	IP 54

ACCESSORI

CH0015 LANCIA PER MASSAGGIO SUBACQUEO

⁽²⁾In caso di installazione dell'accessorio CH0015 l'alimentazione della vasca sarà:

- Alimentazione: 3 x 400V - 50Hz
- Potenza d'ingresso: 1150 VA
- Pressione lancia di massaggio: 0,18-0,47 MPa
- Max flusso d'acqua della pompa: 135 l / m



Vasche 2 celle Lastura e 4 celle Electra




CH5100 VASCA LASTURA BABY

Questa vasca è un dispositivo unico nell'ambito dell'idroterapia, essendo stata progettata specificamente per un impiego in campo pediatrico. Adatta ai trattamenti riabilitativi per bambini fino ai due anni. Le ruote consentono di spostare la vasca da un ambiente all'altro.

Dotazione standard: due zone di massaggio, con 24+10 idrogetti massaggianti. Intensità del getto regolabile in ogni zona. Altezza regolabile su due livelli in base alle esigenze del terapeuta.


ACCESSORI

CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI

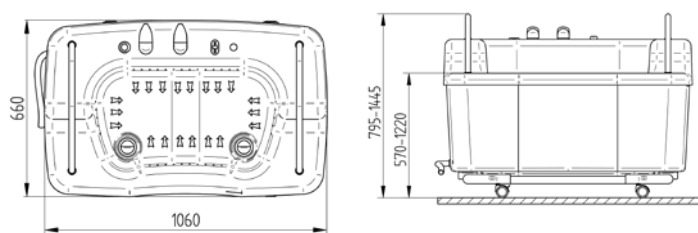

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	106 x 66 x 79,5 / 144,5 h cm
Capacità utile vasca	30 l
Capacità max vasca	42 l
Peso	71 kg
Temperatura max acqua	60°C
Max flusso d'acqua della pompa	-
Tempo di riempimento	1,3 min
Tempo di svuotamento	2,5 / 3,2 min
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza d'ingresso	600 VA
Immissione acqua calda e fredda	-

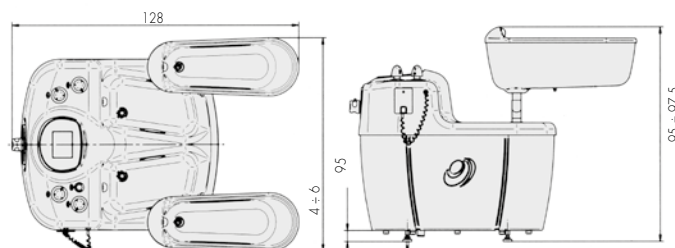

CH4000 VASCA ELECTRA 4 CELLE

Il bagno galvanico ELECTRA è progettato per applicazioni con corrente galvanica agli arti superiori e inferiori. Dotazione standard: design ergonomico per paziente ed operatore. Seduta confortevole per il paziente. Durata della procedura programmabile fino ad un'ora. Valore superiore della corrente fino a 500 mA per cella. Corrente massima tra le celle fino a 30 mA. Impostazione della corrente come galvanica, monofase, difase, CP e LP. Visualizzazione grafica della curva di corrente e della direzione di scorrimento. Facile utilizzo e comunicazione attraverso un display grafico con touch panel. Elettrodo esterno. Programmazione delle combinazioni degli elettrodi e dei tipi di corrente e loro memorizzazione in serie, in base alle raccomandazioni del medico. Piedini regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	128 x 95 x 95 / 97,5 h cm
Capacità utile vasca	arti sup. 13 x 2 l - arti inf. 14,5 x 2 l
Capacità max. vasca	arti sup. 24,5 x 2 l - arti inf. 27 x 2 l
Peso	56 kg
Temperatura max acqua	60°C
Alimentazione (2)	230 V - 50 Hz
Potenza d'ingresso	30 VA
Precisione corrente	+/- 10%
Precisione tempo	+/- 5" h
Regolazione corrente	2 mA step
Variazione corrente	circa 50 mA/s
Valore corrente	20-500 mA
Numero elettrodi	9
Scelta polarità della fonte	Per ogni elettrodo
Indicatore polarità	Per ogni elettrodo
Voltaggio in uscita	24 V
Raddrizzamento parziale	50 Hz monofase (MF)
Raddrizzamento integrale	100 Hz difase (DF)
1 sec MF + 1 sec DF	CP
Protezione elettrica	Classe I
Protezione	IP 54

Vasca da parto in acqua ed esercizi pre-parto

13



CH5200 VASCA DA PARTO

Vasca per parto in acqua ed esercizi pre-parto.

Dotata di blocco automatico dell'acqua di riempimento e di valvola del troppo-pieno. Termometro elettronico della temperatura dell'acqua.

Interfaccia di comando elettronica con touch screen LCD 4.3". Il sistema di cromoterapia a 24 luci, 8 colori, fornisce una fonte luminosa subacquea, che può risultare utile durante le fasi del parto. Telefono doccia per lavaggio igienico. Scaletta a due gradini.



ACCESSORI

CH0002 SCALETTA CON CORRIMANO

CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	193 x 150 x 76 h cm
Capacità utile vasca	300 l
Capacità max vasca	370 l
Peso	80 kg
Temperatura max acqua	60°C
Max flusso d'acqua della pompa	90 l/min
Tempo di riempimento	9 min
Tempo di svuotamento	9 min
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza d'ingresso	30 VA

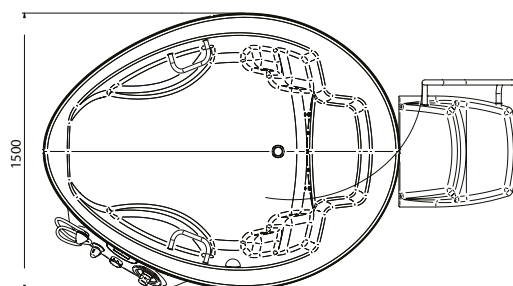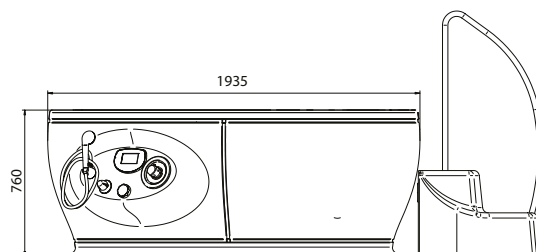

SISTEMA RICICLO ACQUA

Drenaggio con sistema di riciclo dell'acqua.

CH0013 SISTEMA RICICLO ACQUA OCEAN

Per vasca Ocean Forte e Ocean Standard.

CH0018 SISTEMA RICICLO ACQUA OCEAN

Per Ocean De Luxe PC.

CH0020 SISTEMA RICICLO ACQUA OCEAN

Per Ocean Economy.

SISTEMA ANTI-INCROSTAZIONE

CH0006 SISTEMA ELETTROMAGNETICO ANTINCROSTAZIONI

MAGNETOTERAPIA

CH0021 MAGNETOTERAPIA OCEAN

Dispositivo per l'esecuzione simultanea di un trattamento idro e magnetoterapico, con effetto rinforzante dell'efficacia di entrambe le terapie.

2 programmi di lavoro: trattamento delle patologie del sistema muscoloscheletrico, rigenerazione e riparazione dei tessuti.

CROMOTERAPIA

7 colori: rosso, verde, blu, turchese, giallo, arancione, violetto. Fermo colori selezionati.

CH0008 CROMOTERAPIA 32 OCEAN

Per Ocean Economy, 32 luci.

CH0009 CROMOTERAPIA 32 OCEAN

Per Ocean, Standard e Forte. 32 luci.

CH0017 CROMOTERAPIA 48 OCEAN

Per Ocean De Luxe PC, 48 luci.

CH0023 CROMOTERAPIA PER VASCA A FARFALLA

Per vasca a farfalla. 32 luci.

LANCIA PER MASSAGGIO SUBACQUEO

Regolazione continua della pressione e del mix aria.

CH0016 LANCIA PER MASSAGGIO SUBACQUEO


Per Ocean De Luxe. Per massaggio subacqueo.

CH0015 LANCIA PER MASSAGGIO SUBACQUEO

Per vasca Electra CG.

CH0005 GRIGLIA IDROMASSAGGIO



La griglia produce un leggero massaggio stimolante, applicato a tutto il corpo, tramite aria compressa. Il prodotto è progettato per essere trasportabile, dotato di connessioni alla condotta centrale dell'aria compressa o in alternativa del gas. L'effetto massaggiante è creato da bolle d'aria, che fuoriescono dai circa 2000 fori sui tubicini. Il massaggio molto leggero delle micro-bolle è utilizzabile anche con pazienti affetti da problemi cardiaci. La griglia è disposta a segmenti connessi gli uni con gli altri. Viene fornita completa di compressore esterno. Per utilizzarla è necessario predisporre la vasca con l'accessorio cod. CH0014.

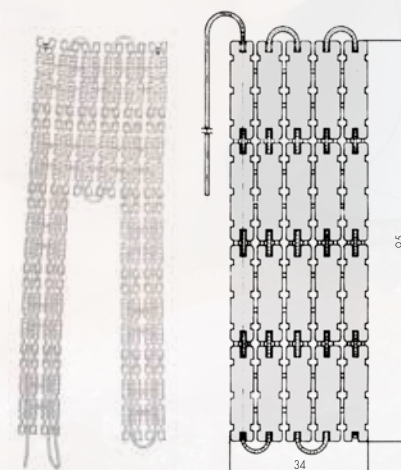



CH0014 CONNETTORE GRIGLIA IDROMASSAGGIO

Da richiedere al momento dell'ordine della vasca, permette la connessione della griglia articolata cod. CH0005 al compressore esterno.

CH0001 SCALETTA

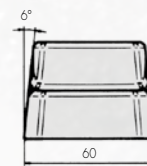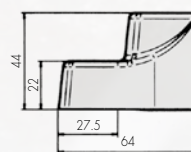

CH0002 SCALETTA CON CORRIMANO

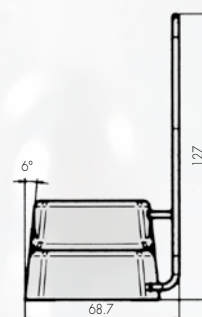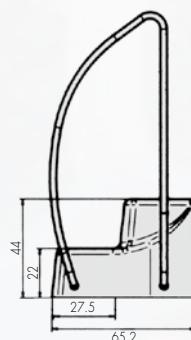

CH0003 SEDIA M1

Con schienale registrabile tutto a destra o sinistra, regolabile in altezza.



CH0004 SEDIA M2

Con schienale fisso centrale, regolabile in altezza.